


Masque de protection Plexiglas FabLab

Attention n'est pas un dispositif médical aux normes et la Fabrique du Loch déclinent toutes responsabilités sur leur efficacité.


Protection frontale
intercalaire
classeur plastique
~0.2mm



Visiere
Rodhoid
ou PETG (0.1µ
>0.4µ

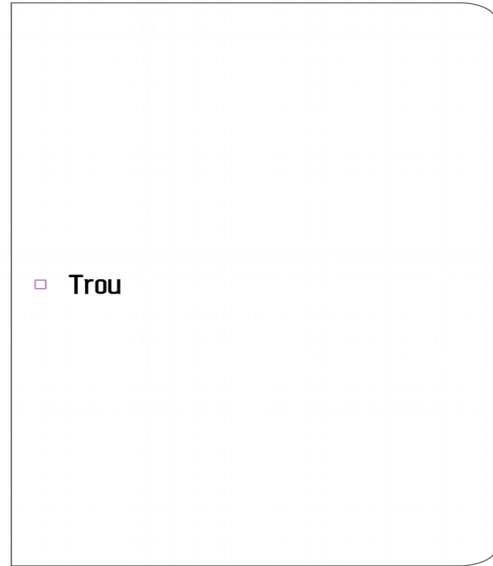

Support
PMMA
3mm

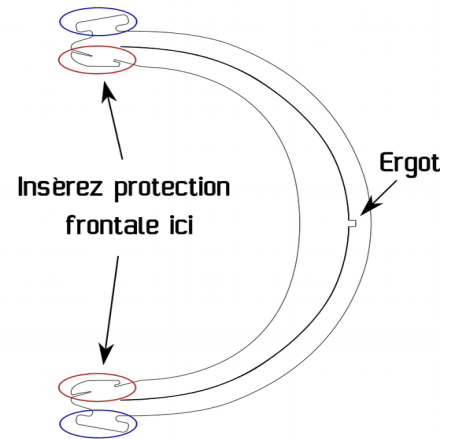

1. Montage :

Insérez d'abord la visière en butée dans un coté de la fente prévue à cette effet sur le support. Positionnez ensuite le trou dans l'ergot pour aligner la feuille dans la fente et le deuxième coté s'imbriquera plus aisément.

La protection frontale se bloque dans les trous intérieurs (en rouge)

L'élastique se positionne dans les attaches extérieures (en bleu)

2. Désinfection

Pas d'autoclave ni de désinfection à chaud, les matières utilisées risquent de fondre ou de se déformer.

Ultraviolet : Ok

Eau oxygéné : Ok

Javel 1:10 pendant 3 min minimum : Ok

Gel hydroalcoolique : Ok

Alcool 70 % pendant

Toutes questions ou demande 06 78 12 70 46