


## Masque de protection Plexiglas FabLab

*Attention n'est pas un dispositif médical aux normes et la Fabrique du Loch déclinent toutes responsabilités sur leur efficacité.*

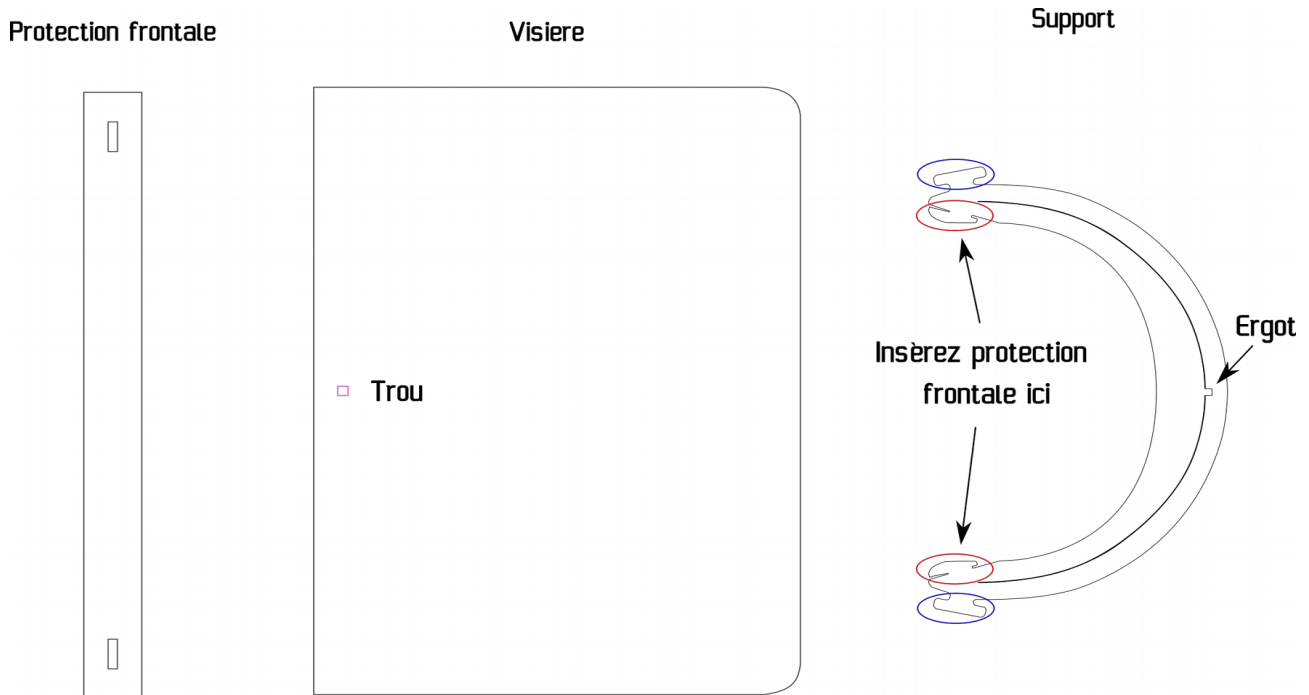

### **1. Montage :**

Insérez d'abord la visière en butée dans un coté de la fente prévue à cette effet sur le support. Positionnez ensuite le trou dans l'ergot pour aligner la feuille dans la fente et le deuxième coté s'imbriquera plus aisément.

La protection frontale se bloque dans les trous intérieurs (en rouge)  
L'élastique se positionne dans les attaches extérieures ( en bleu )

### **2. Désinfection**

Pas d'autoclave ni de désinfection à chaud, les matières utilisées risquent de fondre ou de se déformer.

Ultraviolet : Ok  
Eau oxygénée : Ok  
Javel 1:10 pendant 3 min minimum : Ok  
Gel hydroalcoolique : Ok  
Alcool 70 % pendant